

BLIMO

KÄYTTÖOHJE - BLIMO X-1400 PREMIUM



1 Turvallisuus

X-1400 Premium -laitetta saa käyttää vain yksi henkilö, jolla ei ole näkö-, kuulo- tai reagoimiskykyä heikentäviä sairauksia. Jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista, suosittelemme, että kysyt lääkäriltäsi neuvoa ennen X-1400 Premium -laitteen käyttöä.

- Aja esteiden yli ja reunakivien päälle vain niiden matalimmassa kohdassa ja suorassa kulmassa.
- Äkillisiä käännöksiä tai nopeuden muutoksia ei suositella.
- Vältä jyrkkiä pintoja, jos on liukastumisvaara jäisten tai märkien pintojen vuoksi.
- Vältä ajamista irtonaisilla pinnoilla, kuten soralla.
- Aja aina suoraan ylämäkeen, älä zigzag-liikkeellä.
- Älä käännä X-1400 Premiumia kaltevilla pinnoilla.
- Älä aja X-1400 Premiumia portaita alas.
- Aja aina eteenpäin alamäkiä, reunakiveyksiä ja muita esteitä alas.

1.1 Kaatumisenestopyörät

X-1400 Premium on varustettu takana olevilla kaatumisenestopyörillä. Nämä ovat hätätilanteessa toimiva turvajärjestelmä, johon ei pidä koskaan luottaa normaalikäytössä. Ne on suunniteltu estämään X-1400 Premiumia kaatumasta taaksepäin jyrkissä rinteissä. Jos huomaat pyörissä vaurioita, lopeta skootterin käyttö ja vie se sertifioidulle mekaanikolle, joka voi varmistaa, että alusta ei ole vaurioitunut.

1.2 Turvalliset rinteet

X-1400 Premium voi kiivetä vaarattomasti jopa 12 asteen kaltevuuden rinteitä. Tällä 12 asteen kaltevuudella X-1400 Premium voi pysähtyä, jarruttaa ja kääntyä. On mahdollista yrittää jyrkempiä rinteitä, mutta suosittelemme vahvasti, että et tee niin. Vähennä skootterin takapuolelle kohdistuvaa kuormitusta liu'uttamalla istuinta mahdollisimman paljon eteenpäin ja nojaamalla eteenpäin, jotta vähennät takapuolelle kaatumisen mahdollisuutta rinteissä.



Kuva 1 – Suositellut kaltevuudet

2 Johdanto

X-1400 Premium on korkean teknologian liikuntarajoitteisten apuväline, joka palvelee sinua uskollisesti ja tarjoaa iloa vuosien ajan. Tämä käyttöohje esittelee X-1400 Premium -skootterin käytön, huollon ja hoidon. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin asiasta, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut X-1400 Premium -skootterin. Kaikki huoltotyöt tulee suorittaa joko valtuutettu jälleenmyyjä tai sertifioitu mekaanikko.

3 X-1400 Premium

3.1 Käyttötarkoitus

X-1400 Premium on suunniteltu käytettäväksi tasaisella päällysteellä tai tiellä paikallisten lakien mukaisesti. X-1400 Premiumia voidaan käyttää märällä ja tuulisella säällä, mutta huonoissa sääolosuhteissa matkaa suunniteltaessa on käytettävä harkintaa. Jos jalkakäytävällä on yli 1 cm vettä, on oltava erityisen varovainen, koska skootterin pito ja ohjattavuus voivat heikentyä. Missään tapauksessa useampi kuin yksi henkilö ei saa käyttää ajoneuvoa kerralla.

3.2 Tahaton liike


Ennen nousua X-1400 Premium -skootterin tulee aina olla paikallaan. Kun X-1400 Premium -skootteri käynnistetään, se pysyy paikallaan, kunnes jokin seuraavista tapahtuu:

1. Eteen- tai taaksepäin-vipu vedetään.
2. Vapaakäyntitoiminto kytketään päälle.

Älä yritä käyttää ajoneuvoa sen ulkopuolelta.

Jos ajoneuvo on liikkeessä, hätäpysäytys voidaan suorittaa vapauttamalla kaasuvivut ja vetämällä voimakkaasti käsikäyttöistä jarruvipua ohjauskahvan oikealla puolella.

4 Digitaalinen ohjauskahvan opas

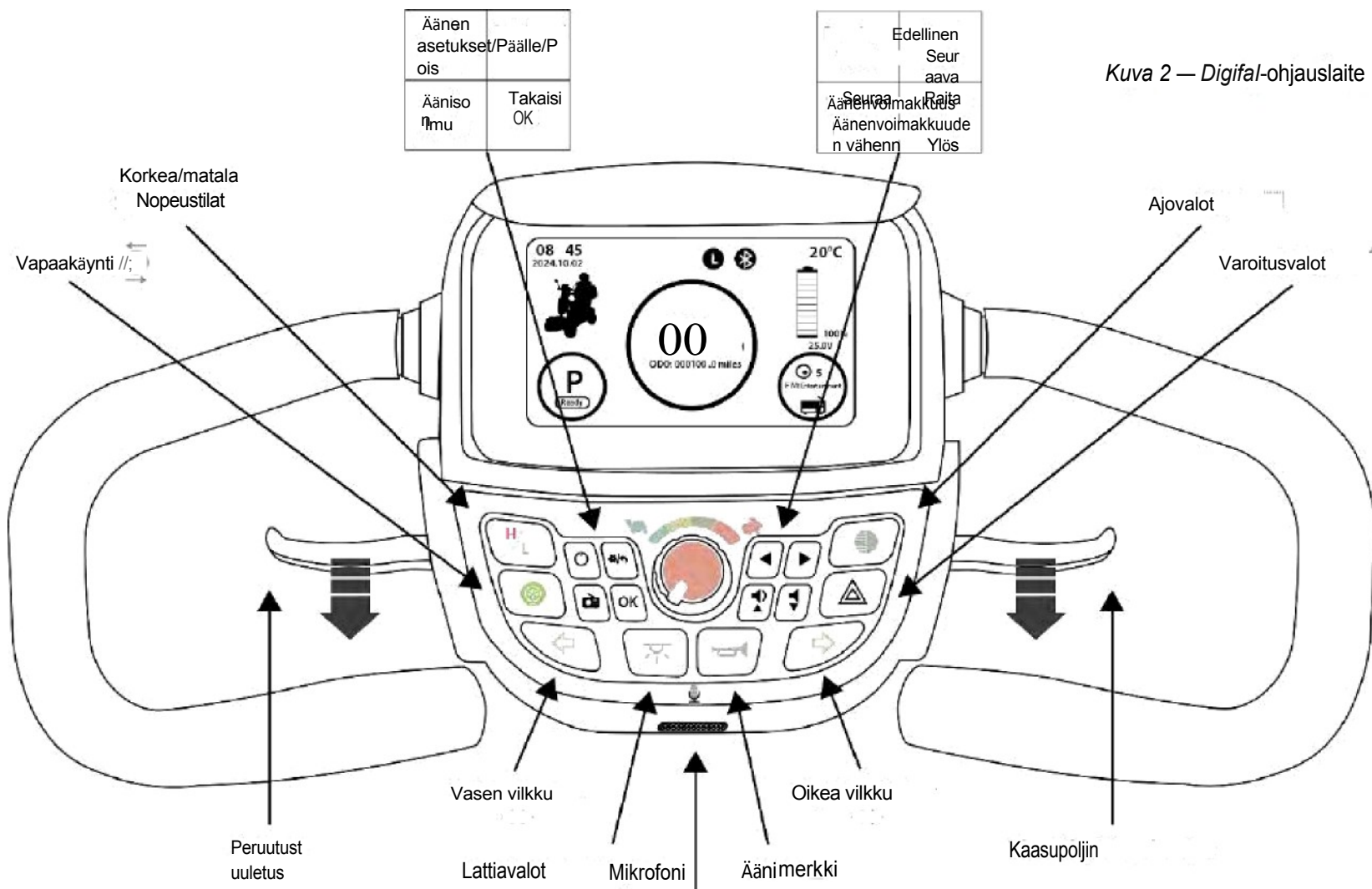

Kuva 2 — Digifal-ohjauslaite

5 X-1400 Premium -laitteen käyttö

5.1 Avaimet ja avainperät

X-1400 Premium -mallin mukana toimitetaan kaksi avaimetonta kauko-ohjainta:



Avaimet toimivat 10 metrin säteellä skootterista.

Avaimeton avain x2

Virran kytkeminen


Käynnistä X-1400 Premium istumalla kuljettajan istuimelle ja painamalla joko avaimenperän "Unlock / Turn On" -painiketta tai ohjauspylvään "Start/Stop" -painiketta.

Virran katkaiseminen

Skootterin sammuttamiseksi paina avaimenperän "Lukitse/Sammuta"-painiketta tai ohjauspylvään "Käynnistä/Pysäytä"-painiketta.

Paikannusääni

Jos avaimeton kaukosäädin on kantaman sisällä, voit käyttää tätä toimintoa skootterin paikantamiseen vilkkaassa ympäristössä. Painamalla paikannusääntä-painiketta aktivoit voimakkaan äänimerkin.

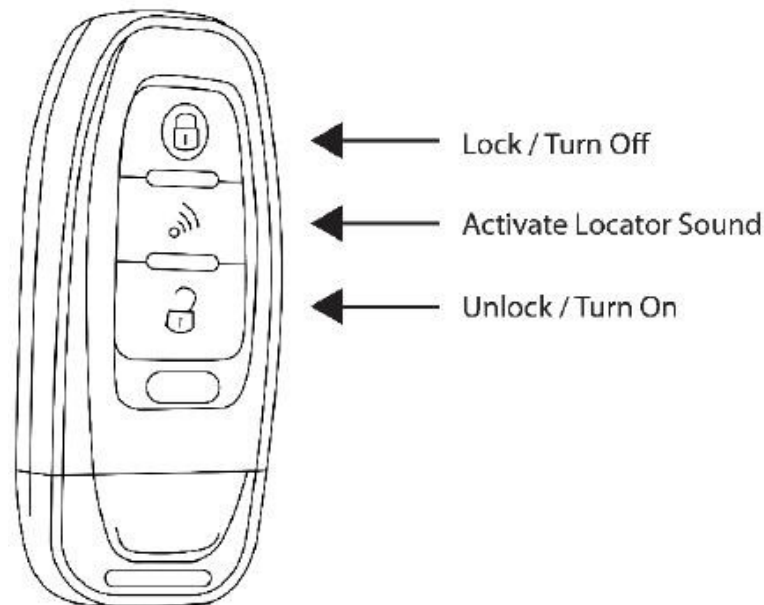

5.2 Istuimen säätö

On tärkeää säätää istuin hyvään asentoon, jotta voit käyttää kaikkia ajoneuvon hallintalaitteita mukavasti.

Eteenpäin/taaksepäin


Voit siirtää istuinta eteen- tai taaksepäin tarttumalla istuimen alla oikealla puolella olevaan mustaan vipuun istuessasi.

Työnnä jaloillasi voimakkaasti lattiaa vasten.


TÄRKEÄ VINKKI – Älä käytä ohjauskahvaa työntämään tai vetämään itseäsi ylös.

Selkänojan säätö

Istuimen kallistusta voidaan muuttaa istuimen oikealla puolella istuessa olevalla nostovivulla.

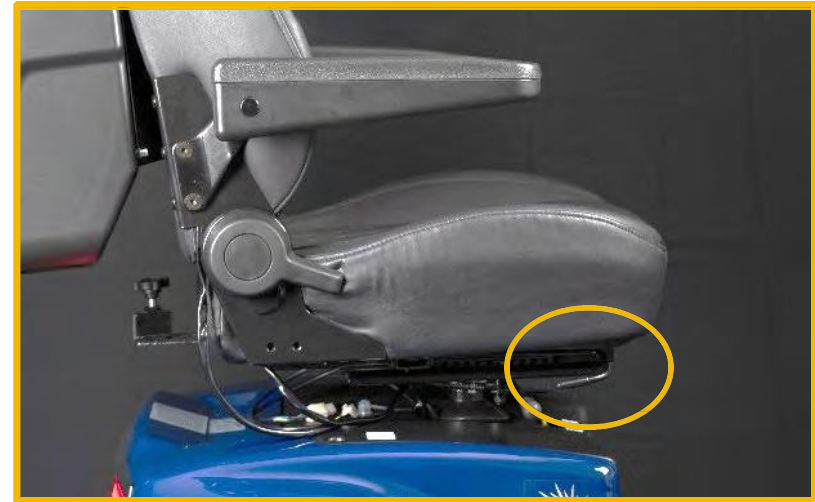

Kuva 3 – Vedä mustasta vivusta säätääksesi istuimen asentoa

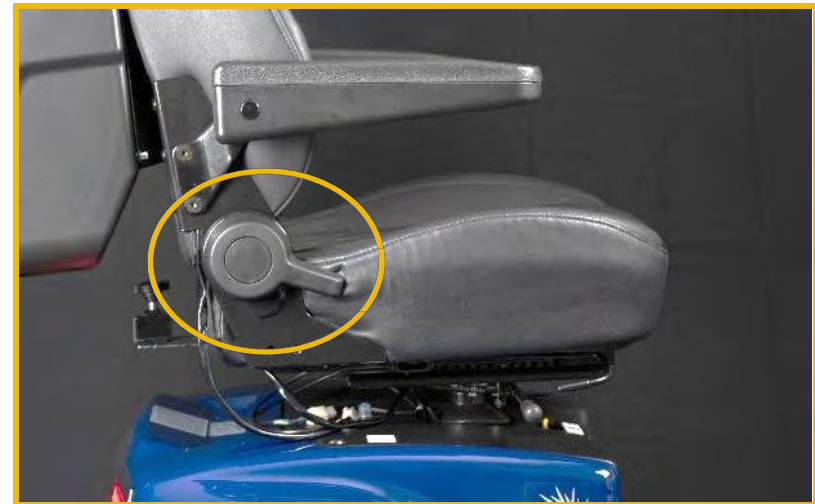

Kuva 4 – Säädä selkänojaa vetämällä mustasta kahvasta

Kääntöasennon säätö

Helppokäyttöisyyden takaamiseksi istuin voidaan kääntää 90 asteen kulmaan.

Istuimen kulmaa voi muuttaa istumalla istuimelle, vetämällä kääntökahvasta skootterin etuosaa kohti ja kääntämällä istuinta vastapäivään.



Kuva 5 – Vedä mustasta kahvasta säätääksesi selkänojaa

5.3 Ohjaustangon säätö

Ohjaustangon kulmaa voidaan säätää painamalla ohjaustangon etuosassa olevaa vipua alaspäin.

Koko ohjauskahva voi sitten kallistua eteen- ja taaksepäin, jotta löydät mukavan ajoasennon. Vapauta vipu varmistaaksesi haluamasi asennon.

Huomaa, että ohjauskahvan liian suuri laskeminen voi vaikeuttaa ohjausta.

Yritä löytää asento, josta digitaalinen ohjauspaneeli on hyvin näkyvissä ja ohjaus voidaan kääntää täysin vasemmalle ja oikealle.



5.4 Ohjaus

X-1400 Premium on varustettu mekaanisella ohjauspylväällä, jota tulisi käyttää mieluiten molemmilla käsillä. Kun X-1400 Premium on paikallaan, ohjaus voi tuntua hieman raskaalta tai jäykältä. Ohjaus kevenee, kun ajoneuvo on liikkeessä.

Tarkimman ohjauksen saavuttamiseksi X-1400 Premium -ajoneuvon tulisi liikkua eteen- tai taaksepäin hallittavalla nopeudella. Työnnä ohjauskahvan toista puolta varovasti poispäin itsestäsi, jolloin X-1400 Premium alkaa kääntyä. Varmista, että tarkkailet jatkuvasti ympäristöäsi kaikissa liikkeissä.

5.5 Kiihtyvyys ja jarrutus

5.5.1 Nopeuden säätö

X-1400 Premiumissa on useita nopeuden säätötapoja: korkea ja matala nopeustila sekä maksiminopeuden rajoitin. **5.5.1.1 Korkea ja matala nopeustila**

Korkea nopeus (H) ja matala nopeus (L) säädetään H/L-painikkeella.

5.5.1.2 Maksiminopeuden rajoitin

Punaisella säätimellä säädetään skootterin ajonopeutta tai sovitetaan nopeus kävelevän henkilön nopeuteen. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, kun skootteria käytetään ahtaissa tiloissa.

Käännä valitsinta myötäpäivään, jos haluat ajaa nopeammin, ja vastapäivään, jos haluat ajaa hitaammin.



Kuva 7 – H/L-nopeuden säätö



Kuva 8 – Maksiminopeuden rajoitin

5.5.1.3 Kaasuvivut

Kiihtyvyyttä ja hidastuvuutta ohjataan ohjauskahvan punaisella ja vihreällä vivulla. Ne on suunniteltu estämään eteen- ja taaksepäinajon samanaikainen aktivointi.

Ajaaksesi eteenpäin, vedä varovasti vihreää vipua. X-1400 Premium kiihtyy nopeudensäätimillä asetettuun suurimpaan sallittuun nopeuteen. Hidastaaksesi tai pysähtyäksesi, vapauta kaasuvipu ja skootteri pysähtyy. Häätötilanteessa käsijarru voidaan kytkeä vetämällä ohjaustangon oikealla puolella sijaitsevasta jarrukahvasta.

Peruutusvaihte voidaan kytkeä päälle vetämällä punaisesta vivusta, kun skootteri on pysähdyksissä. Lisätietoja peruutusvaihteesta on kohdassa 5.5.3 Peruutus.

5.5.2 Vapaakäyntitila

Saatat joutua siirtämään X-1400 Premiumia ilman moottoria. Tämä voidaan tehdä painamalla ja pitämällä painettuna ”Vapaakäynti”-painiketta. Skootterin on oltava päällä ja digitaalinäytön valaistuna.

Paina ja pidä painettuna painiketta, jossa on tämä symboli:



Vapauta painike, jotta jarrut kytkeytyvät uudelleen:

Oman turvallisuutesi vuoksi käytä tätä toimintoa vain tasaisella alustalla. Vapaakäyntitilassa on oltava varovainen skootterin ohjaamisessa, koska jarruja ei ole.

TÄRKEÄ VINKKI – Vapaakäyntitilassa skootteri jatkaa liikkumistaan, jos sitä työnnetään.

5.5.3 Peruuttaminen

Varmista, että X-1400 Premium on paikallaan ja tasaisella alustalla, ennen kuin kytket peruutusvaihteen. Ennen liikkeellelähtöä tarkista, että alueella ei ole esteitä ja että suunniteltu reitti on riittävän leveä.

Vedä varovasti punaisesta vivusta, niin X-1400 Premium alkaa liikkua hitaasti taaksepäin. Hidastaaksesi tai pysäyttääksesi, vapauta punainen vipu, niin skootteri pysähtyy. Hätätilanteessa käsijarru voidaan kytkeä vetämällä ohjaustangon oikealla puolella olevasta jarrukahvasta.

5.6 X-1400 Premium -skootterin käynnistäminen

X-1400 Premium käynnistyy, kun avaimeton kaukosäädin on skootterin läheisyydessä ja Start/Stop-painiketta painetaan (kuva 9).

X-1400 Premium on käynnistynyt ja käyttövalmis, kun tervetulonäyttö on näkynyt ja digitaalinen värinäyttö näyttää visuaalisia tietoja (kuva 10).




Kuva 9 – Käynnistys-/pysäytyspainike



Kuva 10 – Digitaalinen kojelauta, joka näyttää tietoja

5.7 Digitaalinen värinäyttö

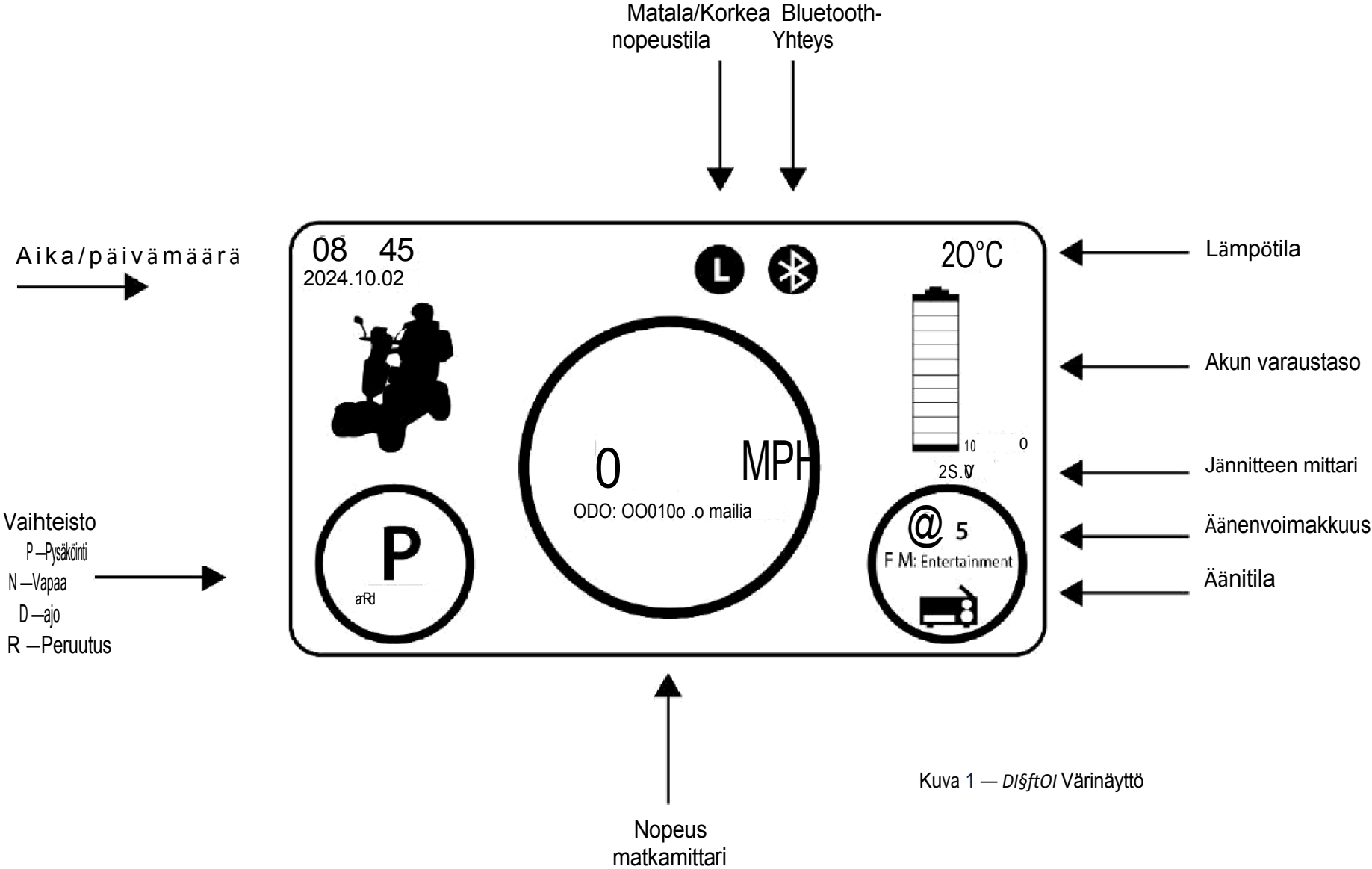

Kuva 1 — *DisftOI* Värinäyttö

5.7.1 Matkamittari

Digitaalisessa värinäytössä näkyvät mailit ovat kumulatiivisia ja edustavat skootterin kulkemaa kokonaismatkaa.

5.7.2 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Aseta kello seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Paina ja pidä asetukset-/takaisin-painiketta painettuna kolme sekuntia.
2. Paina alas-painiketta  ja korosta ”Järjestelmä”, paina OK-painiketta.
3. Paina alas-painiketta  ja korosta ”Paikalliset asetukset”, paina OK-painiketta kahdesti.
4. Paina alaspäin-painiketta  ja korosta ”Aika ja päivämäärä”, paina OK-painiketta.
5. Käytä alas-painiketta  valitaksesi joko Vuosi, Kuukausi, Päivä, Tunti tai Minuutti, paina OK-painiketta
6. Käytä ylös- ja alas-painikkeita  säätääksesi asetusta.
7. Paina OK-painiketta  vahvistaaksesi asetuksen.
8. Toista tarvittaessa vaiheet 5–7 vuoden, kuukauden, päivän, tunnin tai minuutin säätämiseksi.
9. Paina Asetukset/Takaisin-painiketta palataksesi päänäyttöön.
10. Päiväys ja kellonaika asetetaan nyt.

5.8 Ilmaisimet

Merkkivalot ovat kirkkaita, helposti näkyviä oransseja LED-valoja.

Kytke ne päälle painamalla joko vasenta  tai oikeaa  -painiketta kerran ennen liikkeen aloittamista. Kun käännös on suoritettu ja se on turvallista, paina vilkkupainiketta uudelleen vilkun sammuttamiseksi.

5.9 Varoitusvalot

Hätätilanteessa molemmat vilkut voidaan kytkeä päälle samanaikaisesti painamalla



painiketta. Tällöin sekä vasen että oikea vilkku vilkkuvat edessä ja takana, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

5.10 Äänimerkki

Sähköinen äänimerkki aktivoidaan painamalla ohjauskahvan yläosassa olevaa



-painiketta. Äänimerkkiä saa käyttää vain liikennesääntöjen mukaisesti. Äänimerkki soi vain, jos skootteri on kytketty päälle.

5.11 Bluetooth

X-1400 Premium -mallissa on integroitu Bluetooth-yhteys ja kaksi ohjaustankoon rakennettua kaiutinta. Mobiililaitteet

voidaan yhdistää skootteriin musiikin ja äänen toistamista varten:

1. Käynnistä skootteri ja mobiililaitteesi Bluetooth
2. Siirry mobiililaitteesi Bluetooth-asetuksiin
3. Valitse laite nimeltä "scooter" (katso kuva 13)
4. Syötä PIN-koodi "0000" ja muodosta yhteys
5. Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-kuvake ilmestyy näyttöön (katso kuva 12).
6. Toistaaksesi ääntä, siirry mobiililaitteesi äänisovellukseen ja paina Toista
7. Sääda äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden lisäys-/vähennyspainikkeilla (katso kuva 2).
8. Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen painamalla vasenta ja oikeaa painiketta



Kuva 12 – Bluetooth-yhteys aktiivinen



Kuva 13 – Bluetooth-puhelimen asetukset

6.13 USB-latausportit

X-1400 Premium on varustettu USB-latausporteilla ohjauspylvään oikealla puolella. **Portti 1** sijaitsee LED-valon


vieressä ja **portti 2** löytyy oikealta puolelta.

USB-portti 1: Vain dataportti

Tätä porttia voidaan käyttää äänitiedostojen toistamiseen USB-aseilta.

USB-portti 2: Vain latausportti

Tätä porttia voidaan käyttää matkapuhelimen ja tablettien lataamiseen.

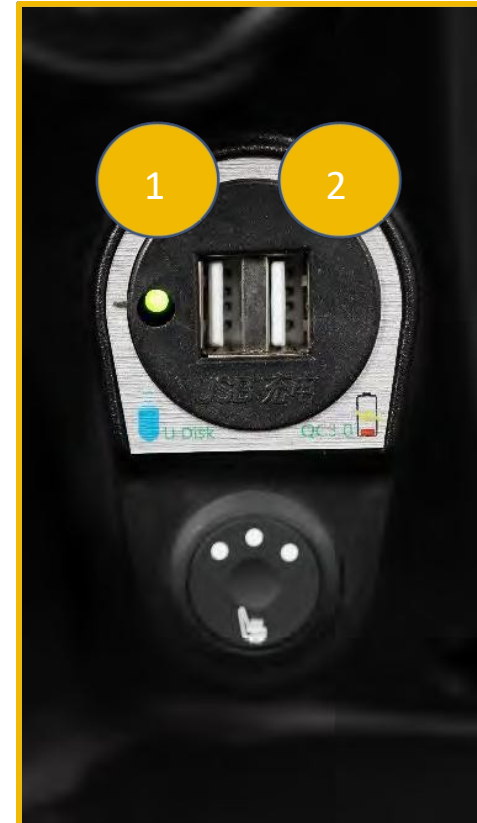

Kuva 16 – USB-latausportit

6.14 Pullon ja matkapuhelimen pidike

X-1400 Premium -mallissa on kaksi muovista valmistettua pidikettä. Niissä voit säilyttää turvallisesti pullotettuja juomia ja matkapuhelintasi.

TÄRKEÄ VINKKI – Pullotelinettä ei saa käyttää alkoholijuomien säilyttämiseen.



Kuva 17 – Ohjaustankoon asennettu kuppi- ja matkapuhelinteline

6.15 Laukkupidike

Skootterin ohjauspylvääseen on integroitu kätevä laukkujen pidike. Tätä pidikettä voidaan käyttää henkilökohtaisten laukkujen tai ostosten säilyttämiseen.

Voit avata pidikkeen painamalla pidikkeen alaosaa, jolloin pidike työntyy kohti sinua. Pussipidike kestää **enintään 2,5 kg:n painon**.



Kuva 18 – Pussipidike

6.16 Latausportti

X-1400 Premium -mallin lataus voidaan suorittaa ohjauskahvan latausportin avulla.

Portti sijaitsee ohjauspylvään oikealla puolella. Lataa ajoneuvo liittämällä mukana toimitettu latauskaapeli porttiin.

Kun X-1400 Premium on lataustilassa, se ei siirry ajotilaan.

TÄRKEÄ VINKKI – Paras käytäntö on ladata akut jokaisen käytön jälkeen. Akkuja ei voi ylikuormittaa, koska laturi katkaisee virran automaattisesti, kun se havaitsee akun olevan täynnä.

Jos et aio käyttää skootteria pitkään aikaan, suosittelemme lataamaan akut vähintään kerran viikossa.

Tämä varmistaa, että ne pysyvät kunnossa ja ovat valmiina säännölliseen käyttöön.



Kuva 19 – Ohjaustankoon
asennettu latausportti

7 Lämmitettävä istuin

Lämmitetty istuin -toiminto aktivoidaan käyttämällä Lämmitetty istuin -painiketta, joka sijaitsee hallintalaitteiden ja pääohjausvivun alla. Lämmitystasoa on kolme: matala, keskitaso ja korkea.

Pois



Kun painikkeen LED-valot eivät pala, se tarkoittaa, että lämmitetty istuin on pois päältä.

Päällä



Kun painike palaa, se tarkoittaa, että lämmitetty istuin on päällä.
3 punaista LED-valoa = korkea
2 punaista LED-valoa = keskilämpötila
1 punainen LED-valo = matala lämpötila



Kuva 20 – Lämmitettävän istuimen painike

8 Huolto

8.1 Polttimoiden vaihto

LED-valot ovat energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, mutta ne voivat lopulta vaatia vaihtamista. LED-lamput voi ostaa X-1400 Premium -laitteen toimittajalta. Lamppujen vaihtaminen tulee suorittaa vain valtuutettu jälleenmyyjä, koska se edellyttää laitteiden purkamista, jotka on suljettava uudelleen alkuperäisten valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8.2 Akun hoito

Akkujen tarkastamiseksi istuin on irrotettava. Irrota molemmat lämmitettävän istuimen liitännät ennen istuimen irrottamista. Irrota istuin tarttumalla istuimen oikealla puolella olevaan mustaan vipuun ja vetämällä sitä ajoneuvon etuosaa kohti. Istuin voidaan sitten irrottaa vetämällä sitä suoraan ylöspäin.

X-1400 Premium -mallin akut eivät vaadi päivittäistä huoltoa, mutta niihin voi olla tarpeen päästä käsiksi. Akut sijaitsevat istuimen alla, ja ne on suojattu mustalla muovikotelolla, joka on kiinnitetty kuudella ruuvilla.


Kun huolto on suoritettu, varmista, että ruuvit kiinnittävät akkukannen tiukasti paikalleen. Aseta istuin takaisin paikalleen ja varmista, että se on lukittu.

8.3 Sulakkeet

X-1400 Premium -mallissa käytetyt sulakkeet ovat käytettävissä ohjausvivun etuosassa olevan peitetyn luukun kautta. Sulaketauluun pääsee käsiksi vetämällä kiinnitysklipsiä alaspäin ja liu'uttamalla kansi pois paikaltaan. Sulakkeiden vaihto on jätettävä ammattilaisille, sillä virheellinen toiminta voi vahingoittaa sähköjärjestelmää.



Kuva 21 – Sulakekotelon sijainti

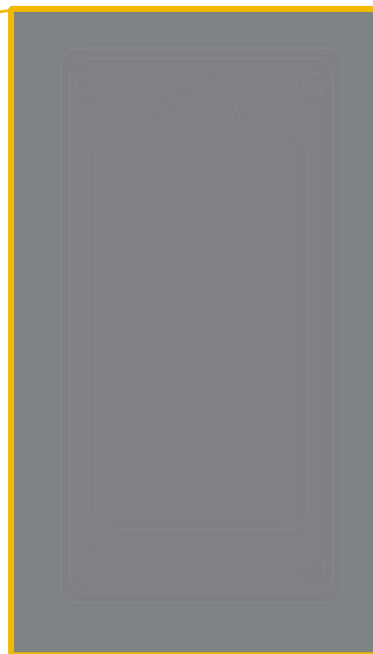

Kuva 22 – Sulakekotelon kansi

8.4 Rengaspaineet

X-1400 Premium -mallin renkaat on suunniteltu tarjoamaan hyvä tasapaino mukavuuden ja energiatehokkuuden välillä. Väärin täytetyt renkaat voivat heikentää ajettavuutta, lyhentää toimintasädettä ja lisätä kulumista. Renkaiden kulutuspinnan syvyyden tulisi olla vähintään 3 mm, jotta ne tarjoavat riittävän pidon tienpinnalla. Jos renkaat ovat kuluneet, ne on vaihdettava ennen X-1400 Premium -mallin uudelleen käyttöä.

Eturenkaiden ilmanpaine: 35 psi

Takarenkaiden ilmanpaine: 35 psi

8.5 Puhdistus ja huolto

8.5.1 Kumimatot

Kumimatto on puhdistettava imurilla, johon on kiinnitetty verhoiluharja. Tahrojen poistamiseen voidaan käyttää mietoa verhoilunpesuaine- ja vesiseosta, mutta alue on kuivattava huolellisesti sen jälkeen.

TÄRKEÄ VINKKI – Älä käytä valkaisuainetta.

8.5.2 Maalipinta

Maalin hoitoon X-1400 Premium -mallia tulee pestä säännöllisesti pehmeällä liinalla ja miedolla autojen pesuaineella. Käytä autojen kiillotusainetta, jotta saat kiiltävän lopputuloksen. Kiillotusainetta suositellaan käytettäväksi alueilla, joilla maalipinta voi altistua epäsuotuisille sääolosuhteille.

TÄRKEÄ VINKKI – Älä koskaan käytä kiehuvaa vettä X-1400 Premium -mallin puhdistamiseen.

9 Takuu

X-1400 Premium -mallilla on 12 kuukauden valmistajan takuu, kun se ostetaan uutena valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuuajana kaikki osat, jotka vioittuvat valmistus- tai materiaalivirheen vuoksi, korjataan jälleenmyyjällä, jolta tuote on ostettu. Jos korjaus ei ole mahdollista, osa vaihdetaan uuteen.

.

Jos valmistusvirhe havaitaan, siitä on ilmoitettava kirjallisesti jälleenmyyjälle, jolta X-1400 Premium on ostettu, 28 päivän kuluessa ostopäivästä.

Tuotteet, joiden käyttöikä on rajoitettu, kuten akut ja renkaat, eivät kuulu takuun piiriin, jos niiden katsotaan kuluneen liikaa tai niitä on käytetty väärin.

Takuu ei kata tuotteen virheellisestä käytöstä, jälkimarkkinoilla tehdyistä muutoksista tai vahingossa aiheutuneista vaurioista johtuvia vahinkoja. Takuuta ei voi siirtää toiselle.

Takuu ei kata vian korjaamisesta aiheutuvia välillisiä kustannuksia, rahti- ja matkakustannuksia, ansionmenetyksiä, kuluja jne.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

10 Tekniset tiedot

10.1 Tekniset tiedot

Moottori	Takavetoinen suljettu vaihteisto 1400 W 24 V DC	Akut	Kaksi 12 V 75 Ah tai 100 Ah
Kojelauta	Digitaalinen värinäyttö 16-painikkeinen ohjausvipu Maksiminopeuden valitsin	Renkaat	Ilmarenkaat

10.2 Koot ja painot

Pituus	1660–1800 mm
Leveys	800
Korkeus	1450 mm
Moottorin teho	1400 W
Ohjain	PG200A
Jarrut	Sähkömagneettiset/hydrauliset
Paino	130 kg (ilman akkuja)
Painokapasiteetti	205 kg
Maavara	110 mm (kuormittamattomana)
Etupyörä	14 tuuman ilmarenkaat
Takapyörä	16 tuuman ilmarenkaat
Suurin nousu	15 astetta
Kääntösäde	1800 mm

1 Kansainväliset nopeudet: Saatavilla riippuen lainkäyttöalueesta ja paikallisesta lainsäädännöstä.

2 Toimintasäde voi vaihdella akun varauksen/kunnon/lisävarusteiden, maaston tyyppin, renkaiden kunnon ja ajoneuvon kuormituksen mukaan.

3 Valmistustoleranssien ja jatkuvan tuotekehityksen vuoksi näissä teknisissä tiedoissa voi olla +/-3 %:n vaihtelua.

4 Vaihtelee käyttäjän painon, maaston tyyppin, akun varauksen, akun kunnon ja renkaiden kunnon mukaan.